

## **Xiaomi InFace MS7000**

Прилад для видалення чорних крапок

Інструкція з експлуатації




## Загальна інформація:

Вакуумний очищувач пор обличчя Protech Blackhead - це багатофункціональний косметичний пристрій, призначений для глибокого очищення пор вакуумним методом. Засіб дозволяє здійснювати дермабразію, очистити пори на обличчі, прибирати вугрі та прищі, лікувати акне та інші функції. Різноманітні насадки допомагають видаляти вугрі, чорні цятки та відмерлі частинки шкіри. Вакуумний очищувач пор з трьома рівнями інтенсивності дозволяє виконати чистку та догляд за шкірою обличчя з урахуванням усіх Ваших потреб.

Комплект очищувача пор містить:

- 1) Прилад InFace MS7000
- 2) Кабель USB для зарядки
- 3) Інструкція
- 4) Силіконова основа проти ковзання
- 5) Комплект всмоктувальних насадок
- 6) Упаковка спонжів
- 7) Силіконовий фіксатор для спонжів

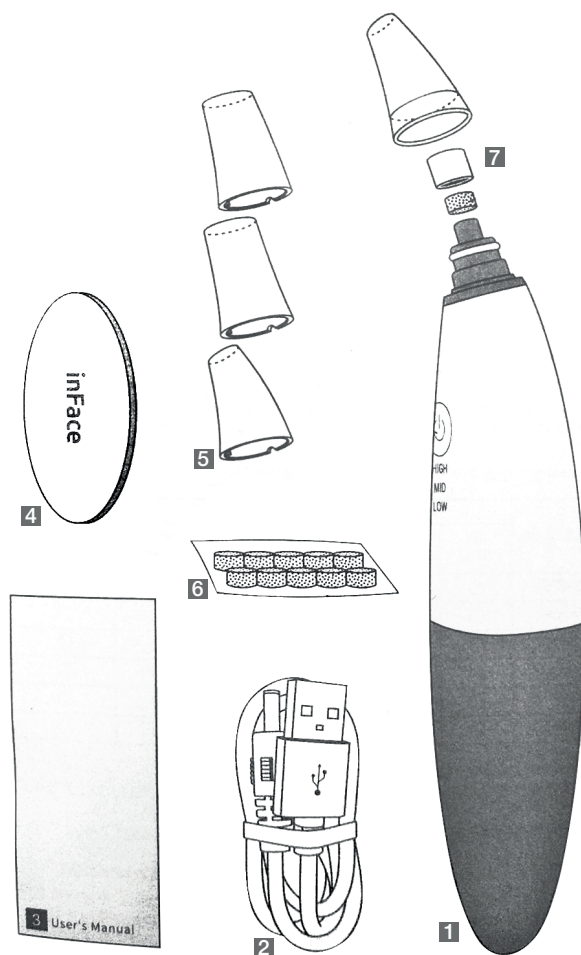

## Попередження:

- Прилад призначений тільки для домашнього/індивідуального використання. Використання приладу в комерційних цілях заборонено.
- Не допускається використання приладу особами молодше 18 років.
- Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатніми знаннями і досвідом в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані про безпечне застосування приладу і можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Діти не повинні виконувати очищення приладу і призначений для користувача догляд за ним без нагляду дорослих.
- Якщо провід електроживлення приладу пошкоджений, його необхідно утилізувати. Якщо він незнімний, необхідно утилізувати весь прилад.
- НЕ використовуйте прилад:
  - на потрісканій шкірі;
  - на відкритих ранах;
  - в області очей та рота;
  - на інших ділянках тіла, крім обличчя (за винятком області очей та рота);
  - під час вагітності;
  - після пластичних операцій на обличчі;
  - якщо Ви страждаєте будь-яким серцевим захворюванням;
  - при наявності шкірних захворювань (наприклад: герпес, судинні захворювання або розростання шкіри);
  - у разі раку шкіри;
  - при наявності подразнень на шкірі;
  - безпосередньо після прийняття сонячної ванни або при сонячних опіках;
  - в період прийому медикаментів, що містять стероїди;
  - в період прийому препаратів, що розріджують кров;
  - при наявності у Вас одного з наступних захворювань: множинний склероз, діабет або аутоімунні захворювання.

# Специфікація

Назва продукту: Xiaomi inFace Blackhead Remover

Модель: MS7000

Розмір: 183 x 35 мм

Маса Нетто: біля 135

Ємність батареї: 400 мАг

Струм зарядки: 300 мА

Напруга зарядки: 5 В

Тривалість зарядки: біля 2 годин

Споживання в режимі очікування: 40  $\mu$ А

Робоча температура: 0-40°C

Сила всмоктування: до 62 кПа

## Метод роботи

1. Прилад має на вибір 2 режими:

Режим 1 (блакитний індикатор вкл.) це безперервний режим всмоктування

Режим 2. (памаранчовий індикатор вкл.) це режим відсмоктування

2. У вимкненому стані натисніть двічі для увімкнення приладу.

3. В увімкненому стані довге натискання для переключення в режим 2.

4. В увімкненому стані натисніть двічі для вимкнення приладу.

## Типи насадок



Велика кругла  
для великих областей



Маленька кругла  
для чутливих зон



Овальна насадка  
для більш товстих  
областей шкіри



Насадка для прищів  
для очищення шкіри від  
прищів

# Використання

Поради перед використанням:

Режим 1 (блакитний індикатор): цей режим має сильне всмоктування яке підходить для типу шкіри з більш товстою шкірою та великими порами, які можуть сильно поглинати глибокі чорні точки на шкірі.

Режим 2 (памаранчевий індикатор): цей режим, прилад працює на всмоктування та на відсмоктування, може підвищити комфорт та зменшити біль для тонкого та чутливого типу шкіри.

Використовуйте режими згідно з вашим типом шкіри.



## Поперше рочінити

1. Очистіть обличчя звичним для вас способом.
2. Покладіть на обличчя теплий рушник на 3-5 хвилини. Це допоможе розширити пори.



## Подруге, всмоктати

1. Увімкніть прилад двічі торкнувшись до кнопки і виберіть відповідний режим. Режими перемикаються за допомогою тривалого торкання до кнопки.
2. Виберіть необхідну швидкість всмоктування.
3. Переміщайте по проблемних зонах. Не затримувати довго на одному місці.
4. Відключіть прилад двічі торкнувшись до кнопки та очистете за допомогою ватного диску та палочки. Використовуйте антибактеріальні засоби.



## Потрете, заспокоїти

1. Рекомендується використовувати тампон змочений тоніком із заспокійливим ефектом.
2. Покладіть його на 8-10 хвилин на оброблені ділянки. Це поліпшить ефект від чищення приладом.