

Urządzenie do mikrodermabrazji

*Beauty Pure Skin*



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Pure Skin

## O produkcie

**Garrett Beauty Pure Skin** jest urządzeniem kosmetycznym, wykorzystującym technologię **odsysania próżniowego**. Służy do oczyszczania, wygładzania i liftingu skóry twarzy, szyi oraz dekoltu, a także ciała.

### KIERUNKI DZIAŁANIA:

- oczyszczenie skóry
- lifting i wygładzenie skóry
- spłycenie zmarszczek
- poprawa mikrokrążenia
- zmniejszenie rozstępów
- uelastycznienie wiotkiej skóry

### WSKAZANIA:

- zaskórniki (czarne punkty) na twarzy, dekolcie, plecach
- szara, ziemista cera
- cera tłusta, łojotokowa, zanieczyszczona
- szorstka skóra na twarzy i ciele
- zmarszczki mimiczne
- utrata jędrności skóry
- pomarańczowa skórka, rozstępy

### PRZECIWSKAZANIA:

- stany zapalne, alergiczne skóry
- trądzik popolity ze zmianami ropnymi, ropowiczy, różowaty
- opryszczka
- zmiany nowotworowe skóry
- naruszona cięgotność naskórka
- skóra bardzo wrażliwa, naczyniowa
- ciąża, karmienie piersią

## Funkcje produktu

### MASAŻ PRÓŻNIOWY:

- bezbolesne usuwanie zaskórników, zanieczyszczeń, złuszczenie martwego naskórka,
- poprawa mikrokrążenia głębszych warstw skóry
- dotlenienie i wzmocnienie bariery ochronnej skóry
- poprawa kolorytu
- ujędrnienie skóry twarzy i ciała

- spłycenie zmarszczek
- zmniejszona widoczność rozstępów
- lepsze wchłanianie substancji aktywnych zawartych w kosmetykach

## Opis produktu



## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garrett Beauty Pure Skin	
Moc ssania: 55 - 65 kPa	Moc: 3 W
Pojemność baterii: 450 mAh	Czas ładowania: ok. 120 min
Waga produktu (netto): 133 g	Wymiary: 173 x 44 x 40 mm

**Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.**

## Nasadki

- **owalna** – służy do liftingu, wygładzenia zmarszczek i poprawy napięcia skóry
- **mała** – przeznaczona do oczyszczania cienkiej, delikatnej skóry wokół oczu, nosa i ust
- **średnia** – odpowiednia dla każdego typu cery
- **duża** – większe partie skóry twarzy i ciała (plecy, dekolt, rozstępy, cellulit)

## Instrukcja użytkowania

- Urządzenie posiada 5 stopni zasysania próżniowego.
- Wykonuj ruchy od dołu ku górze (poziome i pionowe) osobno każda połowa twarzy, od środka kierując się na zewnątrz. Zaczynij od brody, następnie oczyść nos, czoło, a na koniec policzki.
- Przytrzymaj skórę drugą ręką w miejscu rozpoczęcia zabiegu, aby uniknąć nadmiernego jej rozciągania.
- Wykonując zabieg na szyi, omijaj tarczycę.
- Nie przyciskaj mocno urządzenia do skóry. Nie ciągnij przysysanej głowicy do góry.
- W celu wykonania pełnego zabiegu kosmetycznego, po oczyszczeniu skóry, zaleca się stosowanie serum dobrane do typu cery. Można wmasować je ręcznie bądź użyć np. urządzenia do mezoterapii bezigłowej

## Garett Beauty Fresh Skin/Pro lub Garett Beauty Vital Skin.

- Całkowity czas zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
- Zaleca się wykonywanie zabiegu oczyszczania co 10-14 dni.

**⚠️ Pamiętaj, że tylko regularne stosowanie urządzenia przyniesie oczekiwane efekty, a cykliczność zabiegów pozwoli je utrzymać przez długi czas.**

## Obsługa urządzenia

### Włączanie urządzenia i wybór trybów pracy:

- Dobierz nasadkę odpowiednią do planowanego zabiegu i zamontuj ją na korpusie urządzenia.
- Aby uruchomić urządzenie, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez około 3 sekundy. Urządzenie automatycznie uruchamia się na najniższym poziomie zasysania.
- Krótco klikając przycisk **+**, zmienia się poziom intensywności (**5 poziomów**), który należy dostosować do potrzeb i wrażliwości swojej skóry.
- Naciśnięcie przycisku - zmniejszy moc zasysania.

### 1. Przygotowanie twarzy:

- Oczyszczyć twarz z makijażu (możesz użyć szczoteczki sonicznej **Garett Beauty Clean** lub **Garett Beauty Clean Soft**).
- Rozgrzej skórę ciepłym kompresem np. stosując popularną „parówkę na twarz”. Ciepło otworzy pory skóry, ułatwiając ich oczyszczenie.

### 2. Tonizacja:

- Przetrzyj twarz płatkami nasączonymi tonikiem i osusz skórę.

### 3. Włącz urządzenie:

- Wybierz odpowiednią nasadkę i intensywność ssania.

### 4. Oczyszczyć skórę:

- Przesuwaj nasadkę ssącą powoli po skórze. Urządzenie musi być w stałym ruchu.
- Zmieniaj nasadki i siłę ssania w zależności od opracowywanego obszaru skóry. Zanim końcówka sondy opuści skórę, przechył ją tak, aby uwolnić ciśnienie, a następnie odciągnij ją od skóry. Nie należy ciągnąć jej do góry pod kątem prostym, aby na skórze nie powstały czerwone ślady.

**Czas zabiegu:** 1 - 2 min

### 5. Zakończenie:

- Przemyj twarz czystą wodą.

### 6. Maska:

- Nałóż maskę ściągającą/zamykającą pory. Możesz użyć maski, np. nawilżającej w kremie bądź płacie.
- Na zakończenie zaaplikuj krem (**najlepiej z filtrem UV**).

### 7. Wyłącz urządzenie:

- Przytrzymaj dłużej przycisk włączania/wyłączania (3 sekundy). Zdejmij nakładkę, wyczyść ją i zdezynfekuj.

## Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi rękami.
4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
7. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.
8. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
9. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.
10. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym.
- Patrz – przeciwwskazania.**
11. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
12. Nakładki ssące należy oczyścić i dezynfekować po skończonym zabiegu. Nie używać środków żrących.

13. Nie wolno trzymać urządzenia podczas pracy w jednym miejscu – może to skutkować powstaniem siniaków, pęknięć naczyń krwionośnych.

14. Upewnij się, że w urządzeniu jest założony czysty filtr.

Wymień filtr, jeśli jest zanieczyszczony.

## Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

## Gwarancja i reklamacja


Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

**www.garett.pl**

### Producent:

GARETT sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/1413  
25 - 520 Kielce  
**www.garett.pl**

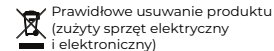

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

