

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego

Beauty True Scrub



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty True Scrub

O produkcie

Garrett Beauty True Scrub to wielofunkcyjne urządzenie do peelingu kawitacyjnego, służące do bezinwazyjnego oczyszczania skóry, wprowadzania substancji aktywnych w jej głąb i złuszczenia martwego naskórka. **Wibracje ultradźwiękowe** 20-30 kHz/min skutecznie oczyszczają skórę z zanieczyszczeń, usuwają zaskórniki, rozjaśniają i wygładzają skórę, poprawiając jej mikrokrążenie. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w **lampy LED**, służące do fototerapii, **prądy EMS** oraz **jonoforezę**.

KIERUNKI DZIAŁANIA:

- oczyszczenie skóry twarzy, dekoltu czy też pleców
- złuszczenie martwego naskórka
- zmniejszenie trądziku
- rozjaśnienie przebarwień
- zmniejszenie widoczności zaskórników, zamknięcie porów
- pobudzenie syntezy kolagenu
- spłycenie zmarszczek
- odżywienie i nawilżenie skóry
- lifting skóry
- wygładzenie szorstkiej skóry
- poprawa mikrokrążenia
- poprawa kolorytu cery

WSKAZANIA:

- skóra przesuszczająca się
- zaskórniki
- trądzik
- zmarszczki
- każdy rodzaj skóry wymagający oczyszczenia

PRZECIWWSKAZANIA:

- podrażniona skóra/rany
- egzema, stany zapalne i alergiczne skóry
- gorączka
- zaburzenia pracy tarczycy
- rozrusznik serca, aparat ortodontyczny, metalowe implanty
- osteoporoza
- ciąża lub karmienie piersią.

Funkcje produktu

1. KAWITACJA – fale ultradźwiękowe, w kontakcie ze zwilżoną skórą, powodują rozbicie i odrywanie się martwego naskórka. W efekcie odsłonięta zostaje młodsza warstwa skóry - pozbawiona brudu, łoju i zanieczyszczeń, a gotowa na przyjęcie składników aktywnych, zawartych w preparatach kosmetycznych. Zabieg zapewnia odświeżenie, rozjaśnienie, wygładzenie i regenerację skóry. Poprawia mikrokrążenie, usuwa zaskórniki i zabija bakterie oraz ma działanie antyseptyczne.

2. JONOFOREZA DODATNIA – na głowicy wytwarzane są jony dodatnie. Tryb ten przyspiesza redukcję zmian trądzikowych, likwidację przebarwień, zwężenie porów, wyciszenie skóry oraz regulację pracy gruczołów łojowych. Podczas pracy wytwarzane jest środowisko zasadowe, które zapobiega rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za zmiany trądzikowe. Zwiększona zostaje także absorpcja składników odżywczych, których ładunek jest dodatni. Dodatkowe rozgrzanie skóry i mikrowibracje ułatwiają proces oczyszczania skóry.



3. JONOFOREZA UJEMNA – na głowicy wytwarzane są jony ujemne. Podczas pracy generowane jest środowisko kwaśne, które stwarza idealne warunki do prawidłowego funkcjonowania komórek odpowiedzialnych za produkcję kolagenu i elastyny. Poprawia się jędrność i elastyczność skóry, spłycają drobne zmarszczki i poprawia owal twarzy. Zwiększona zostaje absorpcja składników odżywczych, których ładunek jest ujemny.

4. ELEKTROSTYMULACJA EMS – metoda wykorzystująca prąd impulsowy o niskiej częstotliwości. Polega na stymulacji mięśni, uelastycznia, napina skórę, niwelując jej obwisłość, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

5. TERAPIA LED

- **światło czerwone:** 620 nm
Dociera do głębszych warstw skóry i aktywuje włókna kolagenowe, usprawnia cyrkulację krwi, redukuje zmarszczki i wygładza skórę. Odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, w szczególności z oznakami starzenia.
- **światło niebieskie:** 465 nm
Zabija bakterie, działa kojąco, redukuje trądzik i blizny potrądzikowe, obkurcza pory. Ma działanie przeciwzapalne. Wskazane dla cery tłustej, trądzikowej oraz ze skłonnością do teleangiektazji.

Opis produktu

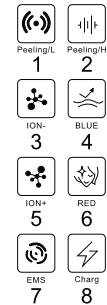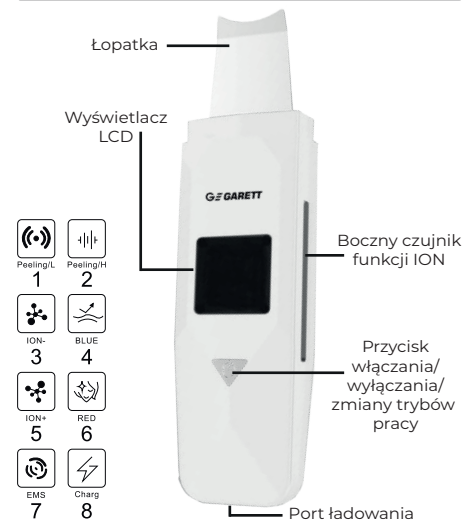

1. Tryb oczyszczania Light(lekki)
2. Tryb oczyszczania High(mocny)
3. Jony ujemne ION(-)
4. Niebieskie światło
5. Jony dodatnie ION(+)
6. Czerwone światło
7. EMS
8. Wskaźnik ładowania

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Garrett Beauty True Scrub	
Częst. drgań: 23 kHz	Napięcie: 3,7 V
Pojemność baterii: 450 mAh	Czas ładowania: ok. 120 min
Waga produktu (netto): 90 g	Wymiary: 170 x 45 x 21 mm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Instrukcja użytkowania

- Zdejmij biżuterię zarówno z rąk (zegarek, pierścionki), jak i z miejsca zabiegowego (łańcuszek, kolczyki).
- Nie trzymaj urządzenia w jednym miejscu na skórze podczas zabiegu, łopátka musi być w ciągłym ruchu.
- Do wykonania peelingu, skóra musi być zwilżona. Możesz spryskać całą twarz lub zwilżyć płatkami kosmetycznym nasączonym wodą, tonikiem lub płynem micelarnym.
- W czasie zabiegu systematycznie zwilżaj skórę.
- W trakcie zabiegu wycieraj łopatkę z nadmiaru płynu i zanieczyszczeń.
- Nie przyciskaj łopátki mocno do skóry. Pracuj powoli i delikatnie, pod kątem 45 stopni do skóry.
- W trakcie zabiegu skóra może ulec zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.
- Nie pracuj urządzeniem w okolicach oczu, tarczycy i kręgosłupa szyjnych.
- **Zabieg powinien trwać łącznie max. 15 minut, każdy tryb pracy urządzenia trwa 5 minut.**
- **Po bokach urządzenia znajdują się czujniki jonów. Muszą być w stałym kontakcie z dłonią podczas zabiegu.**
- **Zaleca się korzystanie z urządzenia, co 7 - 14 dni.**
- **Efekty są zauważalne już po pierwszym zabiegu. W celu podtrzymania i wzmocnienia efektów zaleca się wykonanie serii 5 - 10 zabiegów.**
- Każdy z trybów możesz wykonywać osobno, w zależności od potrzeb skóry. Pamiętaj jednak, że składniki aktywne lepiej wnikają w skórę, która została złuszczone.
- Zabiegi możesz wykonywać również na plecach czy dekolcie(po uprzednim wykluczeniu chorób serca).
- **Wykonuj ruchy pionowe zawsze od dołu do góry bądź poziome.**
- Do wprowadzania substancji aktywnych użyj ampulek, serum bądź koncentratów o konsystencji żelowej, dostosowanych do potrzeb Twojej skóry bądź po aplikacji ulubionego serum, nałoż na twarz żel do ultradźwięków. Ułatwi to wnikanie składników w głąb skóry i zapewni poślizg głowicy.
- W celu włączenia urządzenia przytrzymaj włącznik przez ok. 2 sekundy. Rozpocznie się tryb peelingu. Naciskając ponownie, zmieniisz tryb pracy. Przytrzymaj ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie.

Pamiętaj, że tylko regularne stosowanie urządzenia przyniesie oczekiwane efekty, a cykliczność zabiegów pozwoli Ci utrzymać przez długi czas.

Funkcje produktu

TRYB OCZYSZCZANIA

- Funkcje:** peeling kawitacyjny
- Czas zabiegu:** 3 - 5 min
- Kosmetyki:** tonik/kwoda
- Przebieg:**



- Wykonaj demakijaż twarzy. Polecamy do tego szczoteczkę soniczną **Garett Beauty Clean**.
- Włącz urządzenie i zwilż skórę. Urządzenie domyślnie pracuje w trybie delikatnym LIGHT. Możesz go pozostawić bądź zmienić na tryb mocny HIGH, ponownie naciskając przycisk.
- Delikatnie przesuwasz szpatułką od dołu do góry, bądź od środka na zewnątrz twarzy, wzdłuż przebiegu mięśni, pod kątem 45 stopni. Pracuj zawsze na mokrej skórze.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 min.
- Wyłącz urządzenie i oczyść łopatkę bądź przejdź do dalszego trybu wprowadzania.


TRYB WTŁACZANIA

ION(-):

- Funkcje:** jonoforeza(-), światło fotonowe
- Typ cery:** tłusta, zanieczyszczona, trądzikowa
- Czas zabiegu:** 3 - 5 min
- Kosmetyki:** ampułka/serum/koncentrat: dla cery tłustej, normalizująca, oczyszczająca, wyciszająca, itp.
- Przebieg:**

ION(+):

- Funkcje:** jonoforeza(+), światło fotonowe
- Typ cery:** sucha, odwodniona, dojrzała
- Czas zabiegu:** 3 - 5 min
- Kosmetyki:** ampułka/serum/koncentrat: nawilżająca, odżywcza, regenerująca, p/zmarszczkowa, itp.

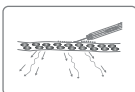

- Wykonaj demakijaż twarzy(pomiń, jeśli kontynuujesz zabieg).
- Zaaplikuj na twarz serum/ampułkę/koncentrat(dostosowany do potrzeb Twojej skóry) o konsystencji żelowej lub dodatkowo nałóż żel do USG.
- Uruchom urządzenie i krótko wciskając przycisk POWER przejdź do trybu ION(-) lub ION(+). Przyłóż łopatkę na płasko (odwróconą w stosunku do trybu peelingu) i wykonuj ruch „do tyłu”, głównie poziomo ku górze, od środka twarzy na zewnątrz.
- Urządzenie wyłączy się po 5 minutach.
- Usuń pozostałości kosmetyku z twarzy i urządzenia.
- Możesz zaaplikować ulubioną maskę dostosowaną do potrzeb skóry.

TRYB LIFTINGU


- Funkcje:** EMS
- Czas zabiegu:** 3 - 5 min
- Przebieg:**



- Wykonaj demakijaż skóry(pomiń, jeśli kontynuujesz zabieg).
- Zaaplikuj na twarz preparat o konsystencji żelowej/żel do USG.
- Włącz urządzenie i uruchom tryb EMS.
- Możesz poczuć lekkie mrowienie/szczypanie skóry.
- Przesuwaj głowicę wzdłuż przebiegu mięśni, od dołu ku górze.
- Po 5 minutach urządzenie samo się wyłączy.
- Oczyść twarz i głowicę urządzenia z resztek kosmetyku.
- Możesz zaaplikować ulubioną maskę na twarz, a następnie krem.

Porady dla użytkowników

Kierunki prowadzenia łopatki po twarzy podczas zabiegu

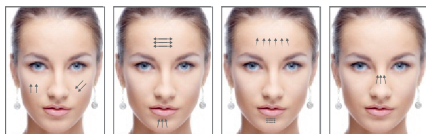

Uwagi dla użytkowników

- Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
- Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
- Nie należy używać urządzenia oraz próbować odłączyć od gniazda mokrymi rękami.
- Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
- Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
- Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.

- Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.
- Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym.
- Patrz – przeciwwskazania.**
- Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
- Po każdym zabiegu oczyść łopatkę i zdezynfekuj wilgotnym płatkami lub chusteczką.
- Nie polewaj/nie spryskuj bezpośrednio głowicy(łopatki) urządzenia.

Naprawa i konserwacja

- W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
- Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
- Nie używając urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

Gwarancja i reklamacja


Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączonej do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

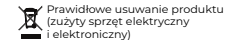

Prawidłowe usunięcie produktu (użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.